


INTEGRIERTER EXTRAKORPORALER BLUTKREISLAUF
VEREINFACHT DIE ANWENDUNG – EIN ARBEITSSCHRITT GENÜGT

Mit den **Artiset** Blutschlauchsystemen von Baxter, einem Pionier und Innovationsführer in der Dialysetherapie, erreichen Sie eine höhere Behandlungsqualität, Mitarbeiterzufriedenheit und betriebliche Effizienz als mit herkömmlichen Blutschlauchsystemen.

Die **Artiset** Blutschlauchsysteme sind extrakorporale Blutkreislaufsyteme und speziell für die **Artis Physio Plus** konzipiert. Gegenüber herkömmlichen Blutschlauchsystemen bieten ihr kompaktes und auf Artis Physio Plus abgestimmtes Design einige entscheidende Vorteile, und zwar sowohl in medizinischer Hinsicht als auch für den Anwender.

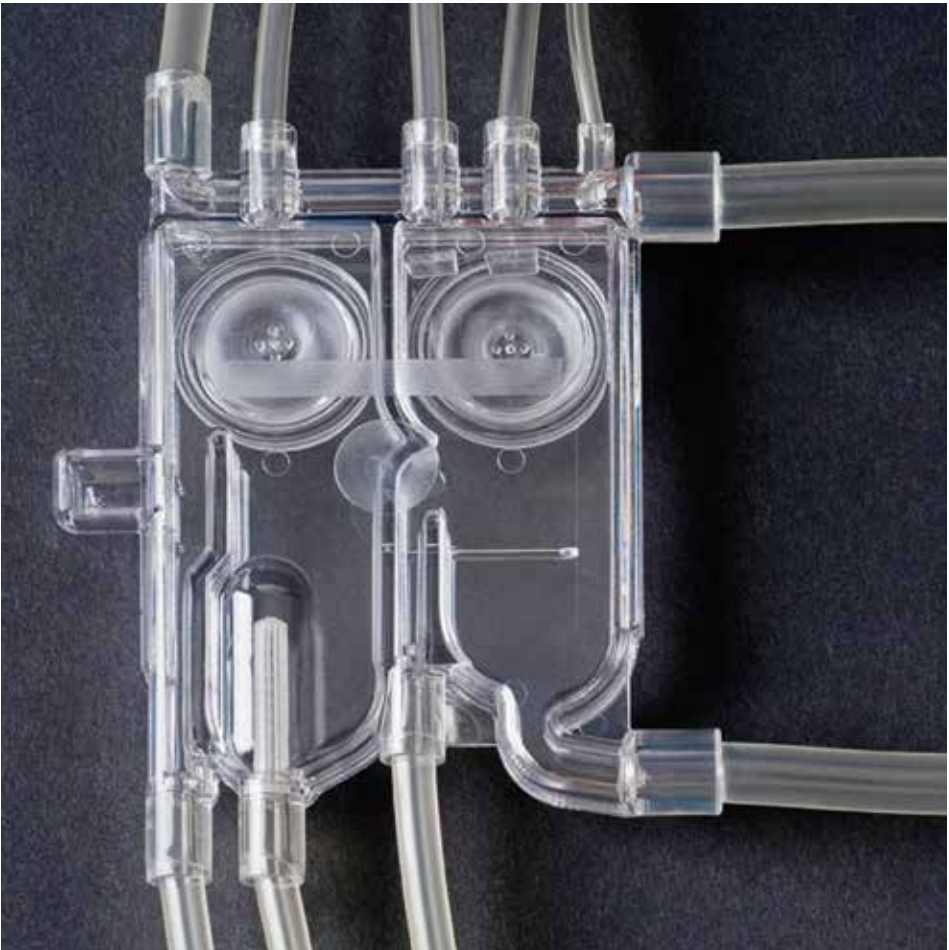

HD DN – ARTISET BLUTSCHLAUCHSYSTEM

PRODUKTBESCHREIBUNG	ARTIKEL- NUMMER	PRODUKTNAME	STERILISATION	STÜCK/ KARTON
Hämodialyse – Doppelnadel- verfahren, Füllen mit Kochsalz- lösung	955075	Artiset HD DNL HC	Gamma-/Beta-Bestrahlung	20
Hämodialyse – Doppelnadel- verfahren mit Ultra Prime	955075	Artiset HD DNL HC	Gamma-/Beta-Bestrahlung	20
Hämodialyse – Doppelnadel- verfahren mit Ultra Prime	955077	Artiset Prepost	Gamma-Bestrahlung	20

HD SN – ARTISET BLUTSCHLAUCHSYSTEM

PRODUKTBESCHREIBUNG	ARTIKEL- NUMMER	PRODUKTNAME	STERILISATION	STÜCK/ KARTON
Hämodialyse – Single-Needle- Verfahren, Füllen mit Kochsalz- lösung	114533	Artiset HD SN HC	Gamma-Bestrahlung	7
Hämodialyse – Single-Needle- Verfahren mit Ultra Prime	114533	Artiset HD SN HC	Gamma-Bestrahlung	7

ONLINE-HDF/HF IM PRÄ-/POSTDILUTIONSMODUS – ARTISET BLUTSCHLAUCHSYSTEM

PRODUKTBESCHREIBUNG	ARTIKEL- NUMMER	PRODUKTNAME	STERILISATION	STÜCK/ KARTON
Hämodiafiltration im Prä- und Postdilutionsmodus	955077	Artiset Prepost	Gamma-Bestrahlung	20
Hämodiafiltration im Prädilutionsmodus	955077	Artiset Prepost	Gamma-Bestrahlung	20
Hämodiafiltration im Postdilutionsmodus	955075	Artiset HD DNL HC	Gamma-/Beta-Bestrahlung	20

ZUBEHÖR

ARTIKEL- NUMMER	PRODUKTNAME	STERILISATION	STÜCK/ KARTON
n.z.	n.z.	n.z.	n.z.
955600	Ultraline HD	Beta-Bestrahlung	80
955600	Ultraline HD	Beta-Bestrahlung	80

ZUBEHÖR

ARTIKEL- NUMMER	PRODUKTNAME	STERILISATION	STÜCK/ KARTON
n.z.	n.z.	n.z.	n.z.
955600	Ultraline HD	Beta-Bestrahlung	80

ZUBEHÖR

ARTIKEL- NUMMER	PRODUKTNAME	STERILISATION	STÜCK/ KARTON
955599	Ultraline HDF	Beta-Bestrahlung	40
955599	Ultraline HDF	Beta-Bestrahlung	40
955599	Ultraline HDF	Beta-Bestrahlung	40

Hinweis: Für den Fall, dass die Ultra-Prime-Funktion nicht verfügbar ist, empfiehlt es sich, eine Reserve an Kochsalzlösung-Beuteln vorzuhalten.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR

PRODUKTBESCHREIBUNG	ARTIKELNUMMER	ZUBEHÖR	STERILISATION	STÜCK/KARTON
Adapter zum Pausieren der Behandlung	114376	EvaClean Connector		150
Spülleitung zum Füllen von Artiset Prepost mit Kochsalzlösung	107472	Spülleitung SP-339G	Beta-Bestrahlung	60

Hinweise zur sicheren und sachgerechten Handhabung der hier genannten Produkte entnehmen Sie bitte der vollständigen Gebrauchsanweisung.

Deutschland
Baxter Deutschland GmbH
Edisonstraße 4
85716 Unterschleißheim
Tel +49 89 317 010
info_de@baxter.com
www.baxter.de

Österreich
Baxter Healthcare GmbH
Stella-Klein-Löw-Weg 15
1020 Wien
Tel +43 1 71120 0
renal_austria@baxter.com
www.baxter.at

Schweiz
Baxter AG
Thurgauerstrasse 130
8152 Glattpark (Opfikon)
Tel +41 44 908 50 50
info_ch@baxter.com
www.baxter.ch

CE 0086

Baxter, Artis Physio Plus, Artiset, Hemocontrol und Hemoscan sind Marken von Baxter International Inc. oder deren Tochtergesellschaften.
DE/MG167/19-0001 ; HDGB0081GER041

Baxter

Baxter
Artiset
BLUTSCHLAUCHSYSTEME




Artiset Blutschlauchsysteme
für die Artis Physio Plus

Hämodialyse

HÄMODIALYSE – DOPPELNADELVERFAHREN ARTISET HD DNL HC

Das Blutschlauchsystem **Artiset** HD DNL HC für eine Hämodialyse im Doppelnadelverfahren beinhaltet:


- Eine **Hemoscan**-Küvette zum Messen von Blutvolumen-Schwankungen; ermöglicht die **Hemocontrol**-Funktion.
- Einen Luer-Lock Anschluss am venösen Schlauch des Artiset, für die **Ultra-Prime**-Funktion.
- Eine bereits angeschlossene Spülleitung für das Füllen mit Kochsalzlösung.

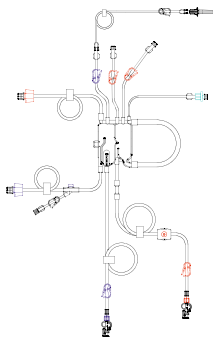

HÄMODIALYSE – SINGLE-NEEDLE-VERFAHREN ARTISET HD SN HC


Das Blutschlauchsystem **Artiset** HD SN HC für eine Hämodialyse als Single-Needle-Verfahren umfasst:

- Die **Hemoscan**-Küvette zum Messen von Blutvolumen-Schwankungen.
- Die arterio-venösen Expansionskammern für ein effektives Single-Needle-Verfahren.
- Einen Luer-Lock Anschluss am venösen Schlauch des Artiset, für die **Ultra-Prime**-Funktion.
- Eine bereits angeschlossene Spülleitung für das Füllen mit Kochsalzlösung.

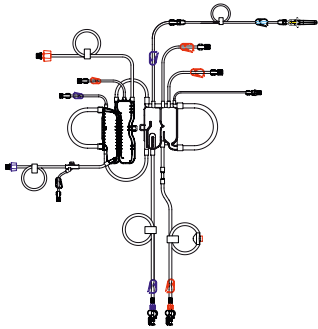

ONLINE-MODUS ZUM AUTOMATISCHEN FÜLLEN ULTRALINE HD

Durch einfaches Anschließen der **Ultraline HD** an den Ultra-Port kann die online hergestellte Flüssigkeit zum automatischen Füllen auf Tastendruck verwendet werden. Die Ultraline HD dient dazu, das System bei einer Hämodialyse (HD) im Doppelnadel- (DN) oder im Single-Needle-Verfahren (SN) mit der online vom Dialysegerät **Artis Physio Plus** hergestellten Infusionsflüssigkeit zu füllen, einen Bolus zu verabreichen oder eine Reinfusion durchzuführen. Die Lagerung und der Transport von Beuteln mit Kochsalzlösung entfallen.

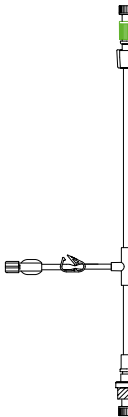

Dieses Blutschlauch-Zubehör ist nur für die **Ultra-Prime**-Funktion bei Hämodialysebehandlungen vorgesehen und dient zur Anwendung mit **Artiset** Blutschlauchsystemen. Es besteht aus:

- Dem T-förmigen Adapter, der die Reinfusion ermöglicht.

ARTISET BLUTSCHLAUCHSYSTEM FÜR DIE HD-BEHANDLUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG	ARTISET HD DNL HC	ARTISET HD SN HC
Artikelnummer:	955075	114533
Volumen [mL]:	132	227
Haltbarkeit:	3 Jahre	3 Jahre
Sterilisation:	Gamma-/Beta-Bestrahlung	Gamma-/Beta-Bestrahlung
Einheiten pro Karton:	20	7

MATERIAL	
Schlauch:	PVC/Polyvinylchlorid (für medizinische Anwendungen, DEHP-frei)
Kassettenkörper:	PETG/Polyethylenterephthalat-Glycol
Punktionsstelle:	Latexfreies Gummi

ZUBEHÖR

PRODUKTBESCHREIBUNG	ULTRALINE HD
Artikelnummer:	955600
Volumen [mL]:	n.z.
Haltbarkeit:	6 Monate
Sterilisation:	Beta-Bestrahlung
Units per box:	80


MATERIAL	
Schlauch:	PVC/Polyvinylchlorid (für medizinische Anwendungen, DEHP-frei)
LEISTUNGSMERKMALE	
Max. Infusionsvolumen	15 l

Online HDF – HF im Prä-/Postdilutionsmodus

HDF IM PRÄ- UND POSTDILUTIONSMODUS HF IM PRÄDILUTIONSMODUS ARTISET PREPOST

Das **Artiset** Blutschlauchsystem für eine Hämodialyse mit Doppelnadelverfahren, für HDF im Prä- und Postdilutionsmodus oder HF im Prädilutionsmodus beinhaltet:


- Eine **Hemoscan**-Küvette zum Messen von Blutvolumen-Schwankungen; ermöglicht die **Hemocontrol**-Funktion.
- Einen Luer-Lock Anschluss am venösen Schlauch des Artiset, für die **Ultra-Prime**-Funktion.

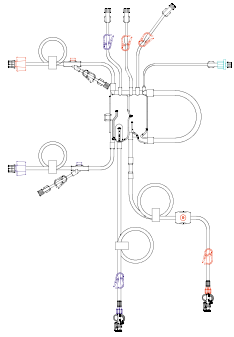

HDF IM POSTDILUTIONSMODUS ARTISET HD DNL HC


Das Blutschlauchsystem **Artiset** HD DNL HC für eine Hämodialyse mit Doppelnadelverfahren im HDF-Postdilutionsmodus beinhaltet:

- Eine **Hemoscan**-Küvette zum Messen von Blutvolumen-Schwankungen; ermöglicht die **Hemocontrol**-Funktion.
- Einen Luer-Lock Anschluss am venösen Schlauch des Artiset, für die **Ultra-Prime**-Funktion.
- Eine bereits angeschlossene Spülleitung für das Füllen mit Kochsalzlösung.

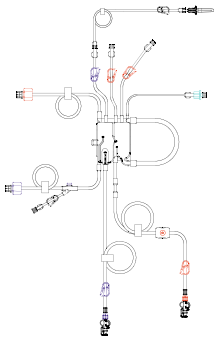

ONLINE HERGESTELLTE SUBSTITUTIONSLÖSUNG ULTRALINE HDF

Die **Ultraline** HDF für die Hämodiafiltration (HDF) mit Doppelnadelverfahren im Prä- oder Postdilutionsmodus und die Hämofiltration (HF) mit Doppelnadelverfahren im Prädilutionsmodus, kombiniert mit Online-Füllen, Bolusverabreichung und Reinfusion des extrakorporalen Blutkreislaufs mit Infusions-/Substitutionslösung aus der **Artis Physio Plus**.

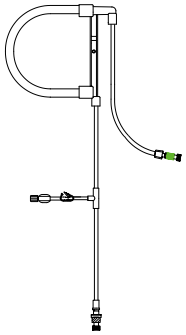

Dieses Blutschlauch-Zubehör ist für die Online-Funktion in Verbindung mit **Artiset** Blutschlauchsystemen vorgesehen. Es besteht aus:

- Einem Kombi-Connector für die automatische Installation und das automatische Entladen des Pumpensegments der Substitutionsleitung.
- Dem T-förmigen Adapter, der die Reinfusion ermöglicht.

ARTISET BLUTSCHLAUCHSYSTEM FÜR DIE HDF- UND DIE HF-BEHANDLUNG

PRODUKTBESCHREIBUNG	ARTISET HD DNL HC/ARTISET PREPOST
Artikelnummer:	955075/955077
Volumen [mL]:	132
Haltbarkeit:	3 Jahre/1 Jahr
Sterilisation:	Gamma-/Beta-Bestrahlung
Einheiten pro Karton:	20

MATERIAL	
Schlauch:	PVC/Polyvinylchlorid (für medizinische Anwendungen, DEHP-frei)
Kassettenkörper:	PETG/Polyethylenterephthalat-Glycol
Punktionsstelle:	Latexfreies Gummi

ZUBEHÖR

PRODUKTBESCHREIBUNG	ULTRALINE HDF
Artikelnummer:	955599
Volumen [mL]:	n.a.
Haltbarkeit:	6 Monate
Sterilisation:	Gamma-Bestrahlung
Einheiten pro Karton:	40

MATERIAL	
Schlauch:	PVC/Polyvinylchlorid (für medizinische Anwendungen, DEHP-frei)
PERFORMANCES	
Max. Infusionsvolumen	150 l

